




laser mate

CryoShot

מערכת קירור לעור

לשמירה הטובה ביותר
על העור שלך

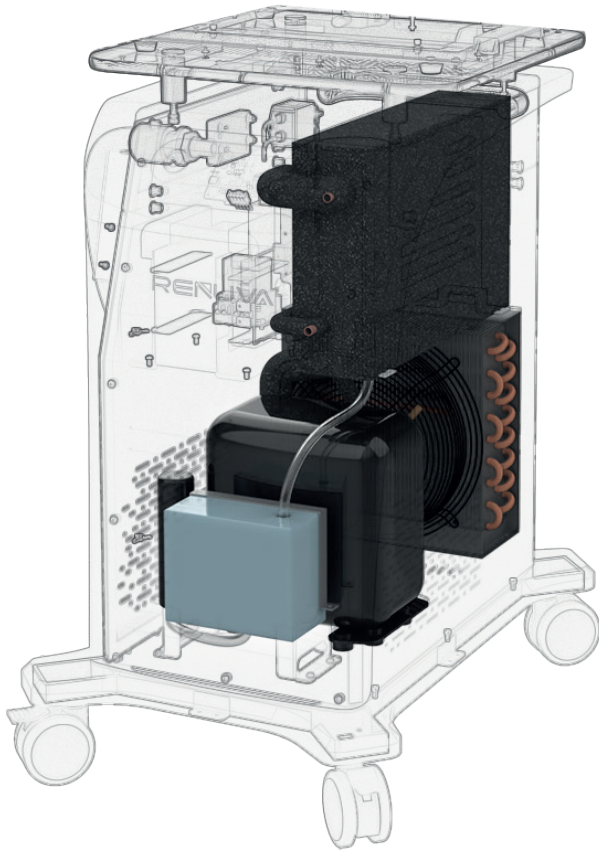

עמידה
בסטנדרטים הגבוהים



חווית טיפול
נעימה ובטוחה



מערכת
לקירור לעור

טמפרטורה נמוכה במיוחד

בשימוש במכשיר ה-laser Mate הנחשב ביעילותו הגדולה לקירור העור. טמפרטורת הליבה מגיעה ל- -40°C מעלות צלזיוס, טמפרטורת יציאת האוויר יכולה להיות נמוכה מ- -20°C מעלות צלזיוס ובכך להעניק הגנה טובה יותר לעור ומשך כאבים - אילחוש. היתרון הגדול בשמירה על טמפרטורה נמוכה ובטוחה הוא מניעת סכנות של כוויות קור המתקבלות משימוש בקרח או מאלחושים.

משטח שולחני


המשטח עשוי מזכוכית שקופה במיוחד, יכול לשאת משקל עד 60 קילוגרם. ניתן למקם עליו מכשיר לייזר או IPL. נוח לשימוש ומשמש כבסיס להנחת מכשיר נוסף עליו. הידית המשולבת נוחה לתפעול ועבודה קלה.



לוח בקרה פשוט וקל לתפעול

תפעול לחצני אפשרויות תמרון מהירות אוויר בחמש דרגות עוצמה. נוח ומהיר לשימוש.



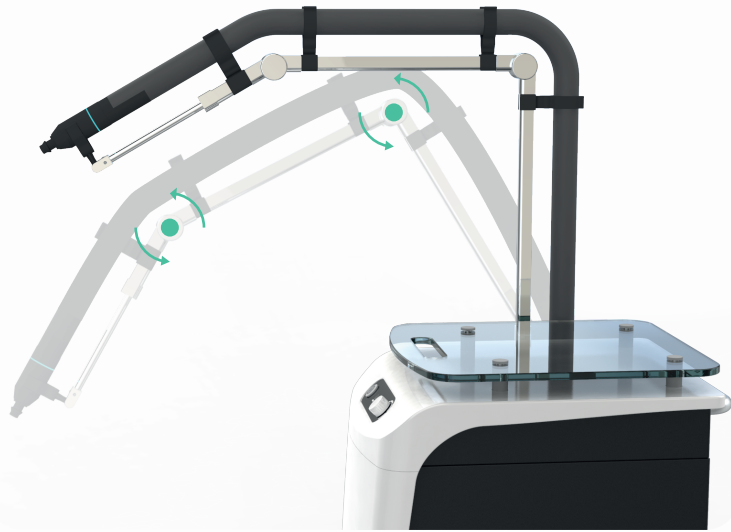

סוגר כוונון גמיש

ניתן לכוונן בצורה גמישה ומדויקת את מיקום אזור הטיפול בנוחות מרבית.

ראשי פלט

ראש פלט אוויר בשני גדלים שונים ועוצמות שונות הניתנים להחלפה.




חכם יותר

מערכת הפשרה אוטומטית התרעה על רמות המים מנגנון המבקר את רמת המים.

נפח אוויר גבוה

נפח של 800 ליטר לדקה. מאורר ללא מברשות עם טורבינת D.C. מאפשר קירור מתמשך של 4 שעות בטמפרטורת (-20) מעלות צלזיוס.

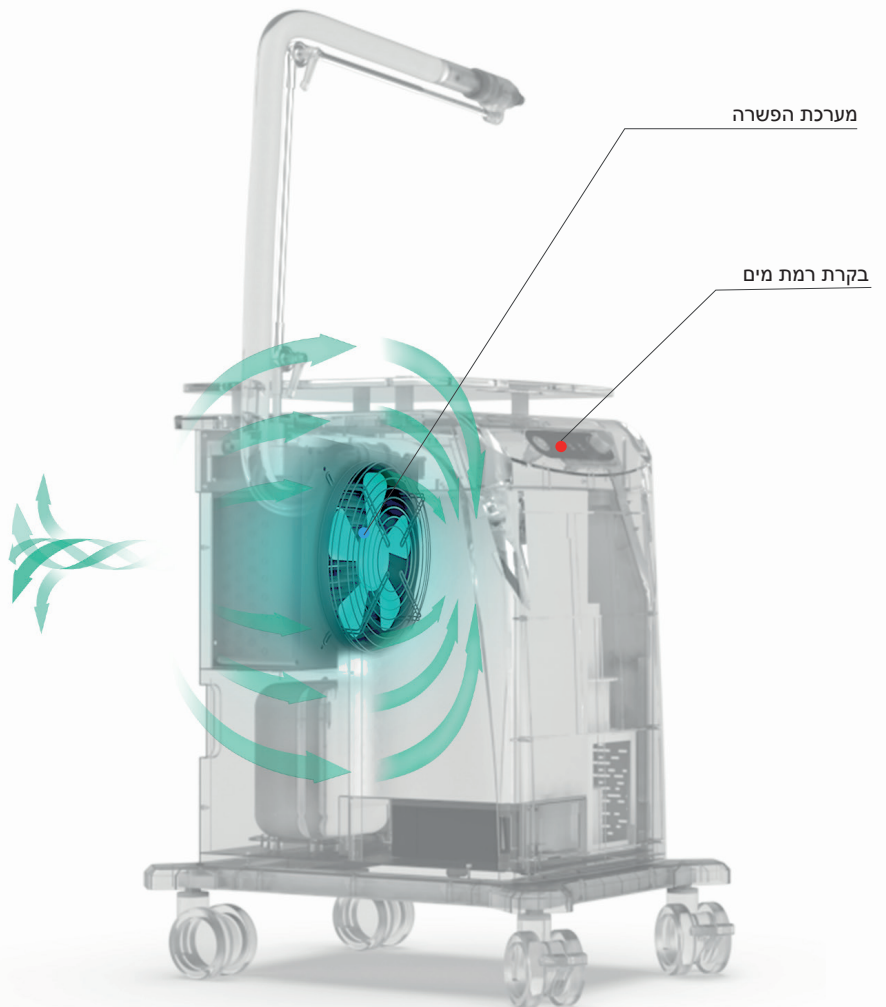

פרטמרים לקירור

נפח זרימת אוויר	0-800L/min
טמפרטורת העור	-20°C (@Ambient TEMP≤25°C)
טמפרטורת המאייד	-40°C (@Ambient TEMP≤25°C)
גלגלי שיניים	5
מערכת קירור	מדחס
רעש מקסימלי	45dB (@Gear 5)
זמן עבודה מתמשך	4hours (@Humidity≤45%)
זמן הפשרה	בין 3 ל10 דקות
זמן לפני קירור (טמפרטורת פיה קטנה מ0)	חמש דקות (@Gear 2, Ambient TEMP≤25°C)

נתונים פיזיים

מימדים פיזיים (L*W*H)	705mm*515mm*832mm
מימדי אריזה (L*W*H)	810mm*713mm*1020mm
משקל נקי	65 קילוגרמים
משקל ברוטו (עם האריזה)	90 קילוגרמים

דירוג חשמלי

כוח קלט	1200W
מתח הספק	100-120VAC, 50/60Hz220-240VAC, 50/60Hz
פיוז	250V 10A