



**fight
for natural
beauty**



להרגיש טוב עם הגוף שלך זה להרגיש טוב עם עצמך

באמצעות גירוי מתוחכם, העור והגזרה שלך יכולים לעבור מהפך מדהים במשך 30 שנות ניסיון ומחקר, פיתחה LPG את הטכניקה הלא פולשנית היחידה לגירוי העור המפעילה את מנגנון חילוף החומרים של התא באופ טבעי. נסו את טיפול ה-ENDERMOLOGIE® לאנטיאייג'ינג וחיטוב יעיל.

LPG - מוסד עולמי מזה 34 שנים

LPG הינה חברה צרפתית אשר נוסדה בשנת 1986 נותנת מענה לשני תחומים:

עיצוב וחיטוב הגוף - BODY CONTOURING

מיצוק עור הפנים - FACIAL ANTIAGING

חברת LPG השקיעה את משאבים רבים כי להופיע במאמרים רפואיים ובספריות המידע לרופאים. מבקשת לשמור על גישת היופי הפיזי והטבעי. קיימות שתי גישות (או שנקרא לזה מודלים? או לקרוא לזה דרכי טיפול?)

גישה קוסמטית:

- אזורים שטחיים ולטווח הקצר
- נעימה
- טבעית

גישה אבלטיבית:

- טיפול פולשני לעיתים לא בטוחים
- אגרסיביים עם תופעות לוואי לא ודאיות
- ניתוחים

LPG דוגלת בגישה השלישית: NOT TOO SOFT, NOT TOO AGRASSIVE

בין הרכה ובין האגרסיבית

אנדרמולוגיה: יופי אך לעולם לא על חשבון הבריאות

יעילות מוכחת מדעית • 100% טבעי • אפס תופעות לוואי

מהפכת טכנולוגית LPG

שנת 2017- מהפכה טכנולוגית בעלת פטנט חדש וייחודי אשר מתעלה על טכניקת אנדרמולוגיה המובילה אותך לעידן חדש!

מהי אנדרמולוגיה LPG- THE ENDERMOLOGIE® REVOLUTION?

אנ-בפנים, דרמה- עור, לוגיה-מדע.
עבודה בתוך העור.

אנדרמולוגיה הינה טכניקה בעלת פטנט בלתי פולשנית ובטוחה המסייעת להעלמת צלוליטיס ע"י סילוק רעלנים.

בעזרת המרצת מחזור הדם והלימפה, ותורמת לשיקום רקמת החיבור של העור. מדובר במכשיר לישה העובד על עקרון של ואקום.


טיפול צלוליט בטכניקת אנדרמולוגיה מתאים בעקרון לאנשים בכל גיל המעוניינים להפחית או לטשטש לפחות את מראה קליפת התפוז על חלקים שונים בגופם.

שלוש פעולות בו זמנית בטיפול אחד:

ביטול משקעי שומן מקומיים ועמידים (+ 70% *)

עור חלק

מיצוק העור- (קולגן אנדוגני, אלסטין, חומצה היאלורונית).

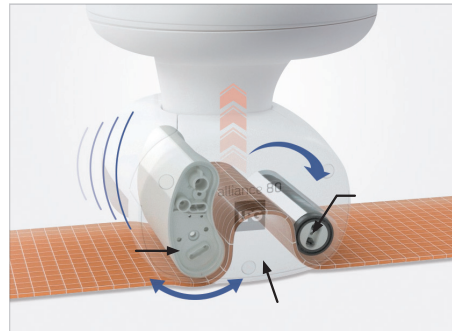

מה אישה רוצה?

100% תוצאות נראות לעין אשר יחזיקו מעמד לטווח הארוך

פתרונות טבעיים עבור יופי וטיפול

אומרות "לא" ללקיחת סיכון בכל מה שנוגע ליופי שלהן

מצפות לתוצאות נראות לעין:

החלקת הצילוליט

אובדן נפח

מיצוק העור





LPG- CELLU M6® ALLIANCE PREMIUM-ב חדשה טכנולוגיה

CELLU M6® Alliance Premium=סינרגיה=שיתוף פעולה

מכשיר ALLIANCE ניתן לרכוש בשילובים הבאים:

- ALLIANCE לטיפול גוף בלבד
- ALLIANCE לטיפול פנים וגוף- CELLU M6® Alliance Premium - זה נכון עינת?

לחברת LPG הצליח להוכיח מדעית בעזרת מחקרו של ד"ר

- טכנולוגיה חדשה כל גלגל נע בצורה ובמהירות שונה ולכיוון שונה- independent motorized rollers
- הרולר הקדמי נע מהר יותר מהאחורי
- הטכנולוגיה היחידה בעולם בעל פטנט ייחודי
- אישור FDA
- מוכח על ניקוז לימפטי
- הפטנט על IMR
- פטנט על הרולרים

MPF: MOTORISED PULSATING FLAPS

הפלאפים נשלטים על ידי מנועים כמו רובוטים

- ישנם שני ראשים בניו דרמולייף:
- קטן- איזור השפתיים ואיזור העיניים
- גדול-לאיזורים גדולים יותר
- הפלאפים בטכנולוגיה החדשה שולטים ב-2 פרמטרים:

1. תדר שאיבה ותזוזת הפלאפים

2. מהירות טובה יותר

- סימולציה (גירוי) לעור גדולה יותר ובכך ניתן לשלב את שני הפרמטרים לעיל
- הפלאפים הינם אישיים ולכל מטופל בנפרד

כיצד המכשיר עובד

LPG מטפל בצלוליט:

SEPTA - סיבי קולוגן שמותחים את העור כלפי מטה, מחזיק את העור ואת השומן התת עורי המחובר לשומן האורכי.
 ה-LPG מחזירה את האלסטיות של הספטא כדי ליישר את העור
 אצל גברים הוא מצטלב ואינו יכול לעלות ולדחוף את העור
 אצל נשים-ורטיקלי, תאי שומן כלפי מעלה והסיבים כלפי מטה.
 השומן נקרא RESERVE FAT הינו שומן אורכי מעל השריר, כל השומן שהנפח שלו הוא כמעט 70% מהנפח כולו.
 בשאיבת שומן הרופאים עובדים ב-2 שכבות : עמוק ואורכי
 METABOLIZE מטבוליזם תאי שומן
 WATER RETANT - הצטברות נוזלים

השומן עולה למעלה וסיבי הקולוגן לוחצים ומורידים את העור מטה
 טיפול במכשיר מקטין את מאגר השומן, מגדיל את הניקוז הלימפטי ולאט לאט גורם להידוק העור והחלקתו
 LPG היא החברה היחידה שמטפלת במקור הבעיה ולא רק בתוצאה הסופית.

ROLL OUT

כשהרולרים נעים כלפי חוץ הם מושכים רק עור ללא שומן, השאיבה אינה אחידה אלא היא מפמפמת -תופסת ועוזבת
 סימולציה שטחית לעור.

מטרה: טיפול בצילוליט, מיצוק העור, נשים לאחר לידה.

ROLL OUT

הגלגלים נעים פנימה בצורת שאיבה ולחץ פנימי
 כך שנשאבת כמות שומן גדולה - עבודה עמוקה יותר
 הרזייה והידוק מקומי
 הצרת היקף



טיפול פנים



- פעילות אמיתית לפנים המגבירה את הייצור הטבעי של תוצרים חיוניים: קולגן להגברת המיצוק אלסטין לשיפור האלסטיות ב-46% יותר חומצה הילארנית לנפח והגברת הלחות בעור ב-80% יותר

- חלוקה של הפנים ל-3 סוגים:

1. פנים נפולות עם שומן

2. פנים שיש בהן שומן

3. פנים רזות מאוד-עור דק/ יבש/ קמטים

- יש לבצע דיאגנוזה טובה בכדי להתאים את הטיפול באילו איזורים לעבוד שיטחי ובאילו איזורים לעבוד עמוק יותר.

- טכנולוגיה LPG מחזירה את האלסטיות לעור, מתמדת בעובי העור

- בקמטים שטחיים ניתן לעבוד ולשפר את מראה העור ב-20%

- מיצוק העור ב-3%

- על פי ניתוח מחקרים אלו הם מספרים גבוהים וטובים

תדירות טיפולי הפנים

חודש ראשון- 8 טיפולים, פעמים בשבוע
חודש שני- טיפול בשבוע, פעמיים בחודש
הממוצע הוא 12 טיפולים

תדירות טיפולי גוף

טיפול גוף דורשים תדירות גבוהה יותר לעומת טיפולי הפנים:
חודש ראשון- 8 טיפולים
חודש שני- 4 טיפולים
הממוצע הוא 12-16 טיפולים


תוצאות

תוצאות נראות לעין כבר בטיפול הראשון



חיסול שומן ובו זמנית שיפור מראה העור - גרוי תאים וחידושם

- הידיות החדשות מטפלות עמוק יותר, תופסות יותר ושואבות יותר
- שיטת העבודה ב-אלינס מותאמת אישית בזכות החיישן- skin identity sensor
- החיישן מזהה את איכות העור ומה שנותר למטפלת הוא לבחור סוג העור וסוג השומן:
 עור/שומן/רקמה רך ורפוי- SOFT
 עור/שומן/רקמה עבה- DENSE
 עור/ שומן/רקמה סיבי- FIBROS
 ניתן לבחור את משך זמן הטיפול ואיזור הטיפול.
- בעזרת החיישן המכשיר משנה את מהירות הפלאפ, כיוון הרולרים ועוצמת הוואקום.
- LPG מחזיר את העור שנים אחורה, מגביר את החומצה הילארונית ומכפיל אותה מגדיל ב-50% את הסיבים האלסטיים של העור.
 הוא עוזר לסיבים "ההרוסים" שהגוף לא פלט והרחיק כדי שהגוף ייצר סיבים מחדש.
 מחזיר את הזוהר ומבהיר את העור על ידי המרצת הדם .

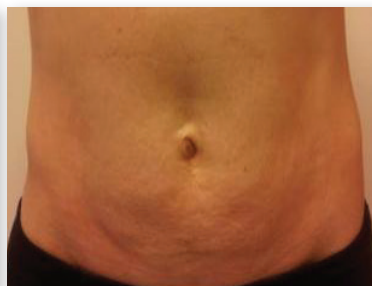

תוצאות נראות לעין מיד אחרי 3 טיפולים

פטנט ©ENDERMOLOGIE המשלב את הטכנולוגיה היעילה ביותר לגירוי עוצמתי ומהיר של העור הודות לחיישן החדש ALLIANCE SKIN IDENTITY הגירוי מותאם באופן מדויק לכל סוג עור ו לכן העוצמה של הטיפול מדויקת.

בכל טיפול בודד אפקט משולש:
השפעה על שומן מקומי ועיקש +70%
החלקה של עור התפוז
מיצוק של העור באופן טבעי (קולגן טבעי, אלסטין, חומצה הילארונית)



טיפול בצלוליט בטכנולוגיית LPG - לעצור את הזמן

בנוסף ליכולות הטיפול הרפואיות והאסתטיות, יכולה שיטת האנדרמולוגיה להילחם גם בהשפעות ההזדקנות. טיפולי צלוליט היא שיטה המתאימה לאנשים בכל גיל, והיא יעילה במיוחד כנגד השפעות הזמן. עם העליעה בגיל, נוטות הפרעות במחזור הדם להחמיר, הצלוליט הופך לקבוע, והעור מאבד את גמישותו. בתהליך ההזדקנות, יכולים הפנים להיתקף בקמטים ובהתנפחות שומנית של העור (לדוגמא, דלדול בצוואר או סנטר כפול) האנדרמולוגיה משפיעה על הצלוליטיס ועל איכות ומראה העור ויתכן גם שהיא תלווה בהפחתת משקל. שילוב של תזונה נכונה תעזור לשפר את יחס המשקל למבנה הגוף והאנדרמולוגיה תפעל ביעילות כנגד הצלוליטיס והיקפי הגוף. הגדלת המיקרו מחזוריות המקומית בטכניקת ה-LPG, מאפשרת את שיקום הרקמות הקושרות ועקב זאת לשיפור המראה הכללי של העור. תוצאות הטיפולים בטכניקת LPG מוכחות גם מדעית על ידי מחקרים מדעיים שבוצעו באוניברסיטאות בכל רחבי העולם

התאוששות מטיפול אנדרמולוגיה

כיוון שהטיפול אינו גורם לאי נוחות או כאבים (ואפילו גורם להתרגעות מסוימת כמו לאחר מסאז'), ניתן לחזור מיד לאחר הטיפול לחיי השגרה, הביתה או אפילו לעבודה. אין מגבלות מסוימות בין טיפול לטיפול ואין צורך לנקוט בפעולות מסוימות, מלבד שמירה על אורח חיים בריא הכולל תזונה מאוזנת ופעילות גופנית סדירה.

לטובת השלמת הטיפול קיימים מוצרים מושלמים לטיפול בבית



התוויות נגד ותופעות לוואי

מחלות סרטן-ניתן לטפל ובאישור רפואי 5 שנים מתום הטיפול

פסוריאזיס

זיהום העור ופריחה

טרשת נפוצה

מדללי דם

מחלות אוטואימונית

הריון

קרישי דם

הרפס

אקנה צלקתית

ולטיגו

רוזיצידה

ורידים בולטים

דלקת

דליות

בוטוקס

שומות

אנגיומות

רכישת מכשיר LPG - יתרונות ערך מוסף בקליניקה שלך

מדע מוכח

תוצאות מידיות הנראות לעין

פתרונות טבעיים, לא אגרסיביים ולא פולשניים

מותג מכובד

סיפוק ללקוחות-שמירה על נאמנות הלקוחות

הגשמה עצמית תוך כדי עבודה

חיסכון בזמן

הגדלת ההכנסות

הרחבת העסק

מעלה את הביקוש

טכנולוגיה החדישה וטובה ביותר



מפרט מכשיר:

ראשי טיפול

פרוטוקול טיפול באנדרמולוגיה

מידות: (865 x 156 x 780 ס"מ)

משקל נטו: 80.5 ק"ג

מווסת מרבי: 69 (690 mbar kPa)

קירור: באמצעות אוורור מכני המשולב במשאבה

מדד הגנה: IP 20

מחלקת הגנה חשמלית: 1

Wifi: 2,4 GHz b / g / n

מאפיינים חשמליים: 100-240V 50Hz 730W

100-230V 60Hz 730W

יציאת USB

+ טאבלט מחובר

